

Elmaslar sonsuza kadar, Skyce®  
sadece eğlence için.



ivoclar  
vivadent®  
passion vision innovation

# Göz kamaştırıcı: Ivoclar Vivadent Skyce®

## Kozmetik prosedürler; Tıbbi uzmanlık


Bugünün diş hekimleri kendilerine danışan insanların güç geçtikçe aslında artık hasta olmadıklarını anlıyor. Onlar mükemmel bir şekilde sıralanmış, ışıltılı beyaz dişler ve hatta diş mücevheri isteyen bireyler. Bu kozmetik prosedürler, profesyoneller tarafından profesyonel ürünlerle gerçekleştirilmelidir. Vivadent, diş hekimlerinin dental gereksinimlere göre bu kozmetik talebi tatmin etmesini sağlayan Skyce diş mücevheri sistemini geliştirmiştir.


## Çekici mücevher; Sağlıklı dişler

Hastalar ışıltılı bir gülümseme, diş hekimleri de dişlerin sağlıklı olmasını ister. Diş hekimleri dişlerin sağlığını, ne olursa olsun korumaya kendilerini adanmışlardır. Skyce, Vivadent tarafından diş hekimlerinin test edilmiş ve onaylanmış ürünleri sorumlu bir şekilde kullanarak bu prosedürü gerçekleştirmesini sağlayacak şekilde geliştirmiştir. Dental mücevherin önceden işlem görmesi gerekmez ve dişe bir ortodontik braket gibi yapıştırılır.



Skyce  
Heliobond  
diş

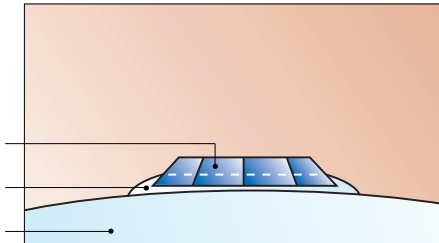

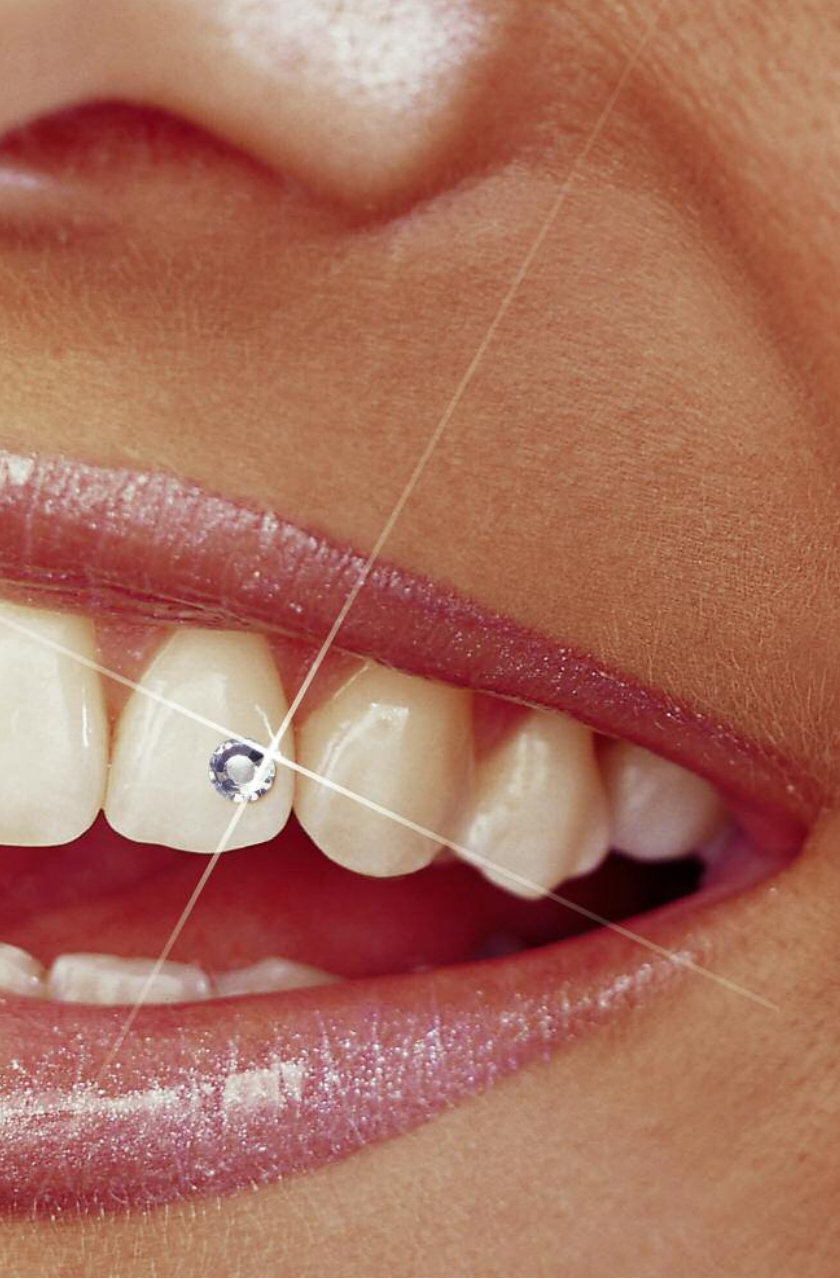

## İki aksesuar; üç bonding aşaması


Skyce Intro Pack, iki farklı boyda on adet mücevher ve bonding bileşenleri içerir. Bu uygulamanın en önemli üç aşaması aşağıda gösterilmiştir:

Dental mineyi fosforik asitle etch edin



Skyce üstüne Heliobond uygulayın

Skyce  
Vivastick adeziv materyal  
Prob

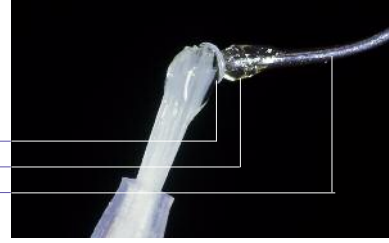

Tüm yönlerden ışıkla sertleştirin



İşıldayan sonuç



## Hafif etching; Güçlü bağlantı

Skyce'in uygulanması kolaydır. İlk olarak %37'lik fosforik asit kullanılarak minede sıvı tutan bir şablon oluşturulur. Daha sonra şeffaf, akışkan Heliobond ile Skyce dişe yapıştırılır.

Bu süreçte Heliobond, Skyce'in arkasındaki retansiyon nişlerine nüfuz eder. Makromekanik retansiyon sağlamak için Skyce etrafına biraz Heliobond uygulanır.

## Tek renk; İki boy

Skyce kristal camdan yapılmıştır ve kristal renginde iki farklı boyda elde edilebilir: Yarıçapı 1.9 mm veya 2.4 mm.dir.





# Skyce®

## Paketleme şekli

### Intro Pack

- 1 x Total Etch 2g
- 1 x Heliobond 6g
- 1 x Vivapad
- 5 x Skyce, crystal 1.9 mm
- 5 x Skyce, crystal karışık boyda çeşitli aksesuar



### Refill

- 5 x Skyce dental mücevher (1 boy):

- 1.9 mm, crystal
- 2.4 mm, crystal

